

Cuando usted pone SALUD PRIMERA DE LOS PACIENTES, cosas notables SIGA

En Frankenman, pensamos tanto en el negocio de la fabricación de instrumentos como en hacer las cirugías más fiables.

Escuchamos a los profesionales a los que hemos ofrecido el uso de nuestros productos.

Estudiamos sus comentarios.

Les invitamos a pensar con nosotros, a idear, para ayudarnos a desarrollar nuevos e innovadores dispositivos.

Por ello sabemos que somos capaces de ofrecer productos de alta calidad a los profesionales de la salud, tanto hoy como en el futuro.



DISEÑO INFORMADO.
ESCRUPULOSAMENTE APLICADO.
METICULOSAMENTE PRODUCIDO.



Instalaciones de fabricación



CHEX[®]
SURGICAL STAPLERS

DISEÑO ASESORADO
ESCRUPULOSAMENTE APLICADO
Y METICULOSAMENTE PRODUCIDO

TransCut™
GAPADORA CORTADORA
TRANSVERSAL DE UN SOLO
USO

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS INCLUYE

| GRAPADORA CIRCULAR UN SOLO USO PARA PEQUEÑO ISOTAL Y HEMORROIDES | GRAPADORA LINEAL UN SOLO USO | GRAPADORA CIRCULAR CURVA UN SOLO USO | CPH24HV | GRAPADORA CORTADORA LINEAL UN SOLO USO | GRAPADORA LINEAL DE COBRE TRANSVERSO UN SOLO USO |
|---|---------------------------------|---|---------|---|---|
| | | | | | |

PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA VER NUESTRA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS, VISITE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.FRANKENMAN.HK



LA PRIMERA EN UNA FAMILIA DE GRAPADORAS
CORTADORAS TRANSVERSALES RECTA
MEJORANDO EL ACCESO Y EJECUCION
Cuchilla mostrada EXPUESTO Sólo a título ilustrativo



SUITE B 13/F WING TAT COMMERCIAL BUILDING
121-125 WING LOK STREET SHEUNG WAN HONG KONG
T +852 3106 3035 F +852 3585 0519
E info@frankenman.hk
www.frankenman.hk

Chao and Chao Healthcare are registered trademarks of Frankenman International Limited

fplus
surgical
www.fplussurgical.com

CHEX[®]
SURGICAL STAPLERS

GAPADORA CORTADORA TRANSVERSAL DE UN SOLO USO

La gama Chex TCLS 40 recta, de grapadora cortadora transversal, representa un gran paso adelante en la presentación de un dispositivo que proporciona grapado de tejido seguro y sin riesgos y de corte en las zonas donde está restringido el acceso.

TCLS40B y 40G representan la primera en una familia de grapadoras de corte transversal lineales.

TransCut™
TAMAÑO REAL

VISTA
LATERAL

fplus
surgical

FIXAPLUS
www.fplussurgical.com



4
COLOCACION MANUAL Y AUTOMATICO DEL PIN QUE FACILITA UN POSICIONAMIENTO Y REPOSICIONAMIENTO MAS EXACTO DEL CABEZAL

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

1


MAS ESTRECHA Y DELGADO CABEZAL PARA FACILITAR EL ACCESO MEJOR Y VISUALIZACION DE LA CARA ANTERIOR Y POSTERIOR DEL INTESTINO

2

GRAN APERTURA DE LA MANDIBULA QUE PERMITE FACILITAR LA COLOCACION DEL TEJIDO

3

9MM ANCHO CARGA CON 4 LINEAS DE GRAPAS Y HOJA DE CORTE

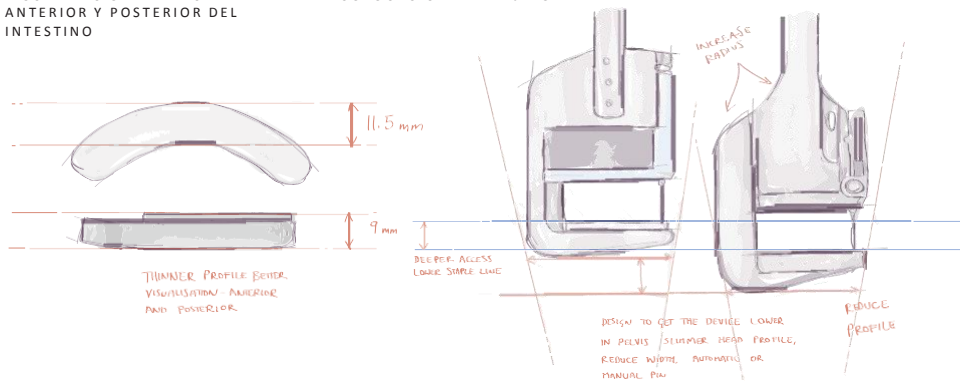

Características y beneficios

Cabezal de 9mm de grosor ayuda con el acceso y maniobrabilidad durante los procedimientos

- Apertura de la mandíbula más amplia en ambas posiciones intermedias y totalmente abiertos - 1,5 mm y .5mm respectivamente en comparación con los dispositivos curvos convencionales
- Diseño antideslizante y ergonómico del mango para mejora del disparo
- Posición de bloqueo intermedio para control de la liberación de la mandíbula con una sola mano, para facilitar el reposicionamiento intra-operatorio
- Pin de retención de tejido manual o automático
- Indicación acústica de la posición de bloqueo intermedio antes del cierre y disparo
- Dispositivo de bloqueo de seguridad en el Cartucho para prevenir el disparo de un cartucho vacío

5

BOTON MANUAL DE LIBERACION QUE FACILITA MANIPULACION CON UNA SOLA MANO

6

PUNTA CURVA DE MANGO DISPARO PARA EVITAR RESBALONES DURANTE EL DISPARO

7

INDICADOR AUDIBLE DE POSICIÓN DE BLOQUEO INTERMEDIO ANTES DE SUJECIÓN Y DISPARO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| MODEL | COLOUR CODE | STAPLE ROW | STAPLE QUANTITY | STAPLE THICKNESS (MM) | STAPLE CROWN (MM) | STAPLE LEG LENGTH (MM) | STAPLE LINE LENGTH (MM) |
|----------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| TCLS 40G | GREEN | 4 | 38 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 39 |
| TCLS 40B | BLUE | 4 | 38 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 39 |

DISEÑO INFORMADO. ESCRUPULOSAMENTE APLICADA. Meticulosamente PRODUCIDO.